

Pregledne rokavice iz lateksa Kid-Man®

Namen uporabe:



Navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo MORAJO biti predložena uporabniku izdelka. PRED uporabo tega izdelka preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.



Osnovni postopki



Čiščenje



Ravnanje z živili

UVOD

- Spodnja navodila upoštevajte poleg informacij na embalaži.
- Pregledne in zaščitne rokavice za enkratno uporabo iz lateksa; brez pudra; nesterilne. Previdno: Primerne za stik z živili (največ 30 minut, temperatura stika do največ 40 stopinj). Vsebujejo naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Brez pudra in DEHP/DOP. V skladu z Uredbo MD (EU)2017/745 (razred 1), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, Uredbo PPE (EU)2016/425 (CAT III), EN ISO 21420:2020 in EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Pred uporabo preverite, da rokavice niso poškodovane. Poškodovanih rokavic ne uporabljajte.
- Pravilno natikanje in snemanje rokavic je večšina, ki od zdravstvenih delavcev in drugih uporabnikov zahteva nekaj vaje. Da bi preprečili prenos okužb, je treba natikanje opraviti v pravilnem vrstnem redu. Preden si nadenete rokavice, poskrbite, da so vaše roke čiste. Pri snemanju rokavic pazite, da zunanja površina rokavic, ki je lahko kontaminirana s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami, ne pride v stik z vašo kožo. Izogibajte se raztegotanju rokavic s silo, da zaradi nenadnega skrčenja ne pride do brizganja kontaminiranih snovi v oči, usta, na kožo ali druge ljudi v bližini.

SESTAVA / NEVARNE SNOVI

Izdelek vsebuje naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije (vključno z alergijami tipa I).

V primeru pojava alergijskih simptomov prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

OZNAKE

Rokavice so osebna zaščitna oprema kategorije III v skladu s Prilogo I k Uredbi 2016/425 in ustrezajo standardom: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.

- Vsaka oznaka vsebuje naslednje informacije: referenca izdelka, številka serije in datum poteka veljavnosti.
- Uporabljeni simboli v skladu s standardom EN ISO 15223: ustrezni simboli za oznake medicinskih pripomočkov, označevanje in obvezne informacije.

CE 2777

Priglašeni organ, odgovoren za certificiranje in skladnost: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irska



EN ISO 374-5:2016
Protects against viruses

Odpornost proti bakterijam in glivam – uspešno opravljeno. Odpornost proti virusom – uspešno opravljeno.*
Odpornost proti penetraciji bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo na testni vzorec.

KLJUČNE FUNKCIJE

- Izdelane iz naravnega lateksa, ki zagotavlja izjemno elastičnost in udobje
- Odlična tipna občutljivost – idealne za natančna opravila
- Brez pudra za zmanjšanje kontaminacije
- Učinkovita zaščita pred virusi in bakterijami
- Teksturirane konice prstov za boljši oprijem
- Za uporabo na obeh rokah, z zvitim robom za ojačanje manšete
- Odlično prileganje, enostavno natikanje in snemanje
- Rokavice so primerne za stik z živili

MEDICINSKA UPORABA	2017/745	RAZRED I	EN 455	AQL 1,5
OVO	2016/425	KATEGORIJA III	EN 374	AQL 1,5


- 100 kosov v škatli
- 10 škatel v velikem pakiranju
- 600-800 škatel na paleti

OSNOVNE INFORMACIJE

Mere	Širina dlani	Celotna dolžina	Debelina		
			Dlan	Manšeta	Prst
XS 5-6	75 ± 5 mm	240 mm	Min. 0,08 mm	Min. 0,07 mm	Min. 0,10 mm
S 6-7	85 ± 5 mm				
M 7-8	95 ± 5 mm				
L 8-9	110 ± 5 mm				
XL 9-10	120 ± 5 mm				
XXL 10-11	130 ± 5 mm				

NATIKANJE ROKAVIC ZA ENKRATNO UPORABO

1

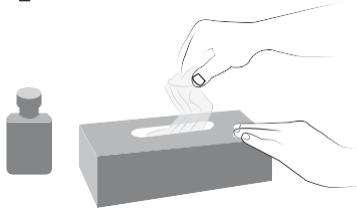


2



3



4

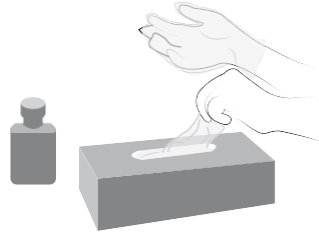

5



6




PRAVILNO SNEMANJE ROKAVIC ZA ENKRATNO UPORABO


1



2

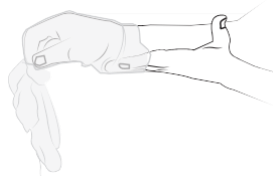

3

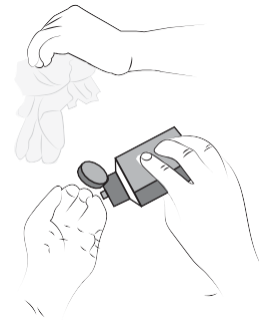

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, virom ozona ali virom ognja. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru pri temperaturi od 5 do 38 °C. Ne hranite v neposredni bližini topil, olj, goriv in maziv.

ODLAGANJE



Odlagajte v skladu z lokalnimi predpisi za kontaminirane medicinske odpadke.

SIMBOLI, UPORABLJENI NA EMBALAŽI



Proizvajalec



Datum izdelave



Omejitev temperature



Glejte navodila za uporabo



Številka serije



Datum izteka veljavnosti



Samo za enkratno uporabo



Recikliranje embalaže



Številka izdelka



Hraniti na suhem



Nesterilno



Ta stran navzgor



Medicinski pripomoček



Ne izpostavljajte sončni svetlobi.



Primerno za stik z živili



Previdno ravnanje



UAB Kasko Group | Kid-Man®
A.Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Litva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
tel. št. +370 5 265 0000

Uvoznik / Distributer v Romuniji : Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr 2-2A, Braila Tel: +40 753 660066

Izdelano na Kitajskem
Zasnova: Kid-Man®

Izdajatelj: UAB Kasko Group | Kid-Man®

Datum zadnje posodobitve 2025-05-13

